

Dos Opciones Brillantes

El **Polaris USB** se conecta directamente a su computadora. La conexión individual de USB a su computadora proporciona energía y transferencia de datos.

El **Polaris UNIVERSAL** permite plena integración a su consultorio a través de opciones múltiples de conectividad, incluyendo S-Vídeo, Vídeo Compuesto en Vivo y Salida de USB.

Especificaciones

Polaris USB

Número de Pieza: D7000
 Dimensiones (Longitud por Profundidad): 20.32cm x 2.7432cm (Pieza portátil)
 Peso: 104.893g
 Resolución: 640 x 480 Píxeles
 Salidas de Video: Vídeo de USB 2.0 a Alta Velocidad
 Iluminación: Faros de LED Blancos Ultra-Brillantes
 Imagen: Normal, No Espejada
 Garantía: 36 Meses

Polaris Universal

Número de Pieza: D7500
 Dimensiones (Longitud por Profundidad): 20.32cm x 2.7432cm (Pieza portátil)
 Dimensiones (Longitud por Profundidad): 14.478cm x 9.652cm x 3.81cm (Módulo de Control)
 Peso: 104.893g (Pieza portátil) / 0.5 libras (Módulo de Control)
 Resolución: 640 x 480 Píxeles
 Salidas de Video: USB 2.0 de Alta Velocidad, Video, S-Vídeo, Vídeo Compuesto
 Iluminación: Faros de LED Blancos Ultra-Brillantes
 Imagen: Normal, No Espejada
 Garantía: 36 Meses

Requisitos de Computación

Sistema Operativo: Windows XP Profesional con Paquete de Servicio 3 o mayor para un Procesador Intel de 32 bits; Microsoft Windows XP Profesional Edición de 64 bits con Paquete de Servicio 2 o mayor para un procesador Intel de 64 bits extendido (x64); Microsoft Windows Vista Business, Enterprise, o Ultimate con Paquete de Servicio 1 o mayor para un procesador Intel de 32 bits o un procesador Intel de 64 bits extendido (x64); Microsoft Windows 7 Profesional, Enterprise, o Ultimate o un procesador Intel de 32 bits o un Intel de 64 bits extendido (x64).
CPU: 2GHz Pentium-4
RAM: 1 GB
Lector de CD ROM: 24x o mayor
Puerto de USB: Puerto de USB 2.0 de alta velocidad, alta potencia*
Pantalla: Tarjeta de video de 16MB apoyando 800 x 600 píxeles con color de 32 bits
Software de Imágenes: Aplicación de software para video en tiempo real conforme a DirectX9

*Sólo el modelo de USB Polaris. Polaris Universal requiere un puerto de USB de sólo 2.0 de alta velocidad.

AIR TECHNIQUES INC.



Nuestra instalación de manufactura en Melville, Nueva York. Innovación y confiabilidad desde 1962.

Air Techniques ha sido un fabricante líder de equipo dental durante casi 50 años. Hemos ganado nuestra reputación a través de nuestro compromiso a la satisfacción de los clientes, y nos enorgullece el entregar a los distribuidores y practicantes dentales en todo el mundo calidad y servicios excepcionales.

Los productos de Air Techniques sólo son distribuidos por aquellos que son autorizados.



Air Techniques Sede:

1295 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3062
Teléfono: 516-433-7676 ■ Llamada gratis en EE.UU. y Canadá: 1-800-AIRTECH
Fax: 516-433-7684 ■ Llamada gratis en EE.UU. y Canadá: 1-888-247-8481

Instalación en el Oeste:

291 Bonnie Lane, Suite 101, Corona, CA 92880
Fax: 951-898-7646 ■ Llamada gratis en EE.UU. y Canadá: 1-800-AIRTECH



Claridad Insuperable.



Las ópticas superiores y el campo focal amplio del Polaris entregan una calidad excepcional de imagen para mejorar su diagnóstico y presentación de caso al paciente.


Razones adicionales por las que la calidad de imagen de Polaris es excepcional:

- Su tecnología de **Enfoque Fijo** permite que todos los objetos de 6mm a 40mm mantengan su detalle nítido. *No se requiere ajustar nada.*
- La interfaz **TWAIN** permite que la pantalla de video en vivo, la funcionalidad del botón y la captura de la imagen sea directa a la mayoría de los programas de software de imágenes dentales conforme a TWAIN 2.1 capaces de manejar múltiples adquisiciones y transferencias de imágenes TWAIN.

Una publicación reciente de The Dental Advisor reportó que el 100% de los asesores recomendarían Polaris.



Comodidad Insuperable.

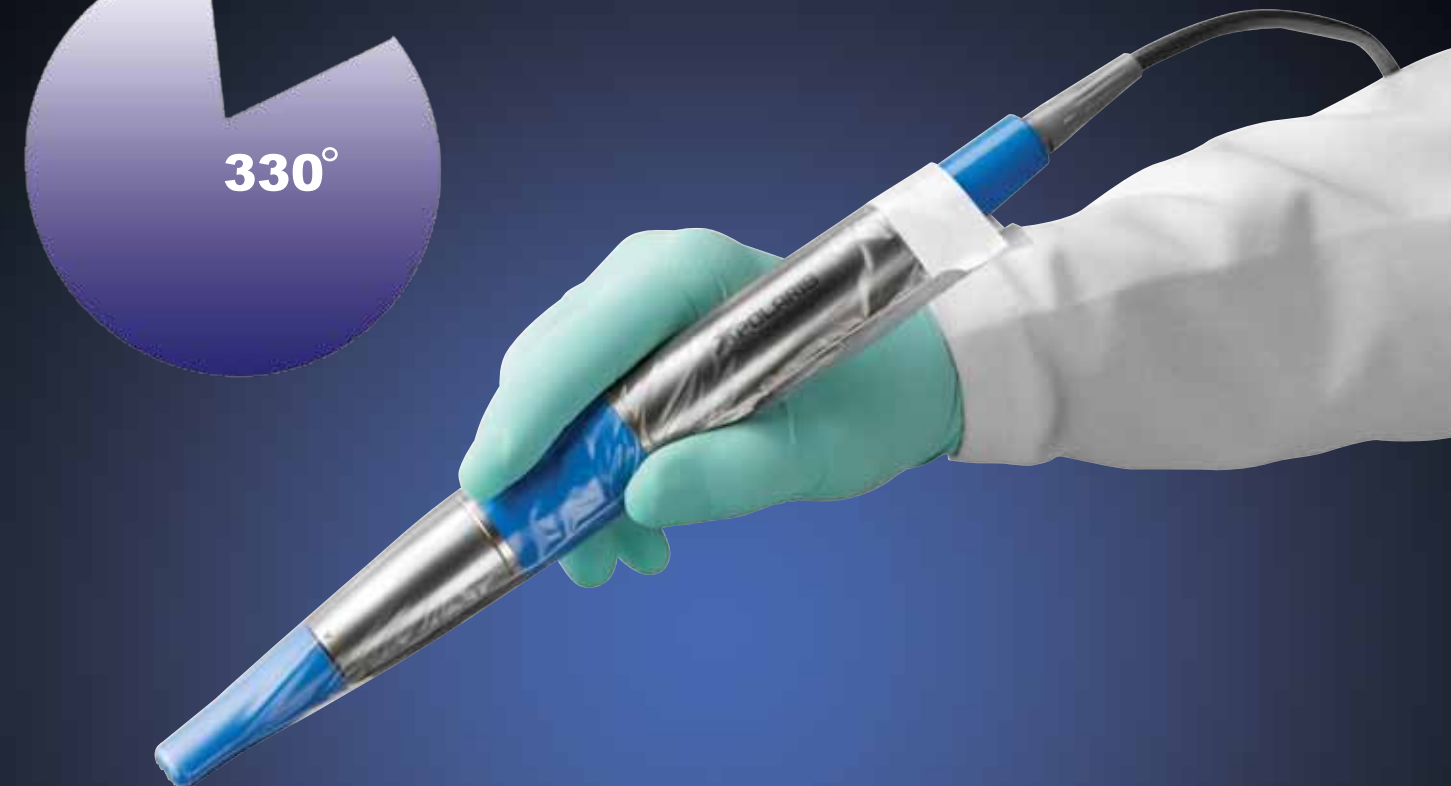

- La característica giratoria **330° swivel** patente en trámite de Polaris le permite capturar cada área de la cavidad bucal con mínimo esfuerzo y máxima comodidad.
- Simplemente ajuste la cabeza giratoria única a su preferencia, y podrá alcanzar aún los ángulos más difíciles en **una operación de ¡una sola mano!**
- Otras características con enfoque a la comodidad incluyen un **diseño elegante, redondeado y ligero**, y a su vez, de construcción sólida.

Conveniencia Insuperable.

La característica única de Polaris de captura-al-soltar hace que la captura sea estable; las imágenes no-borrosas son tan fáciles como 1-2-3:

1. Enfocar Cámara
2. Presionar el Botón
3. Liberar y Capturar la Imagen



Características adicionales convenientes de Polaris:

- La característica **Conexión Rápida** proporciona portabilidad de bolsillo genuina y movilidad de cuarto a cuarto sin esfuerzo.
- Luz LED de **mínimo deslumbramiento**.
- La pieza portátil Polaris se conecta fácilmente a su unidad dental existente.
- La característica **Auto-Encendido** lo prende una vez usted remueva el Polaris de su funda, y su característica **Auto-Apagado** lo apaga una vez lo regrese a la funda.
- Polaris funciona con **Visix** y la mayoría de los programas de software conforme a **TWAIN 2.1**, para una integración fácil en su consultorio.



¡Calidad de imagen excepcional, y la aceptación de casos nunca ha sido más fácil!