



AIR STAR ECO

AIRSTAR[®] ECO

美國市場領導者值得信賴

AIR
TECHNIQUES equipped for life[®]

AIRSTAR[®] ECO

數十年經驗

Air Techniques公司開發和製造各種各樣的無油活塞式壓縮機已有超過50年歷史。我們最新的開發之一是一款強大的高性能“搖擺活塞”設計。選擇我們的全面集成膜式乾燥器或新型自動清除系統。

牙科級空氣

- 清潔衛生的乾燥過濾空氣
- 100%無油
- 獨特的過濾器設計帶來零停機時間

獨特的膜式乾燥器


選擇我們的專利膜式乾燥系統，確保沒有水分進入你的貴重手持器械或進入病人口腔。

清潔、乾燥的空氣

採用膜式乾燥器


現代粘合過程需要使用不含水分的空氣來提供可靠的粘接。膜元件使用數百個微小的中空纖維，將氣流中滲透的任何水分100%吸走。這一自動冷凝排水系統確保沒有水分進入你的貴重手持器械或進入病人口腔。

(ECO “D”型號。)

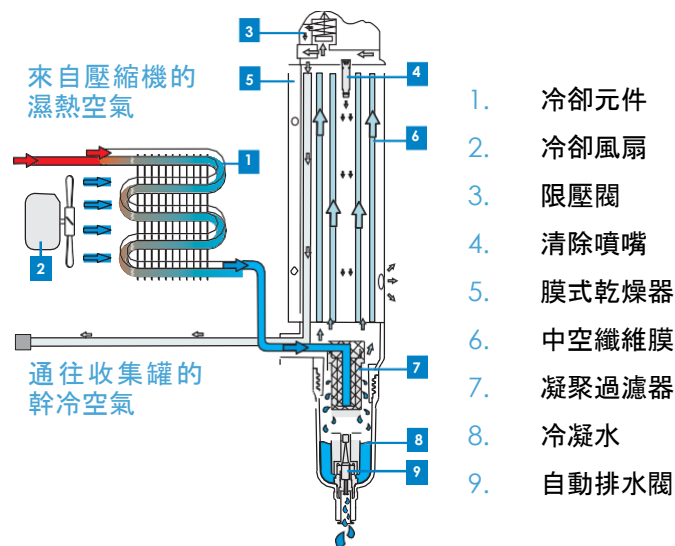

採用自動清除

標準的牙科治療過程應始終使用未混合液態水的空氣。空氣-水分離器自動、連續地清除從罐中積累的冷凝水。由於每年只需更換一個過濾器，這些無乾燥器型號是一個合適的經濟解決方案。(ECO “A”型號。) 這些型號仍然配備了所有的必要操作和安全功能

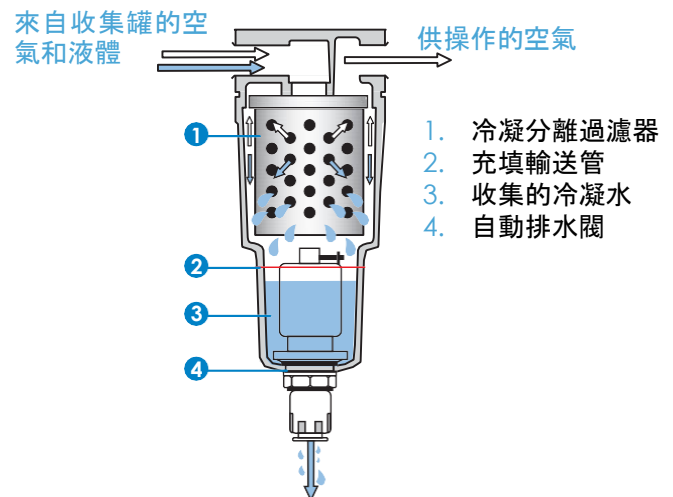

採用膜式乾燥器的AIRSTAR ECO型號

ASE121D



ASE122D



ASE220D



ASE250D



ASE450D



ASE600D



採用自動清除的AIRSTAR ECO型號

ASE121A



ASE122A



ASE220A



ASE250A



ASE450A



ASE600A



規格

型號	自動清除或乾燥器	使用者數	罐尺寸 (升)	電壓 (VAC)	頻率 (赫茲)	功率 (馬力)	輸出流量 † @ 0 BAR (升/分鐘)	輸出流量 † @ 5 BAR (升/分鐘)	重量 (千克)	尺寸 寬 x 高 x 深 (釐米)
ASE121	A / D	1	20	110*	50/60	1.1 @ 50Hz 1.1 @ 60Hz	100	70	40	41 x 66 x 56
ASE122		1	20	230*	50/60	1.0 @ 50Hz 1.2 @ 60Hz	100	70	40	41 x 66 x 56
ASE220		1-2	20	230*	50/60**	1.8 @ 50Hz 2.2 @ 60Hz	200	140	50	41 x 66 x 56
ASE250		1-2	50	230*	50/60**	1.8 @ 50Hz 2.2 @ 60Hz	200	140	65	41 x 66 x 56
ASE450		3-4	50	230*	50/60**	3.5 @ 50Hz 4.4 @ 60Hz	400	280	100	46 x 76 x 76
ASE600		5-6	100	230*	50/60**	5.3 @ 50Hz 6.7 @ 60Hz	600	420	145	46 x 76 x 76

*電壓範圍 +/-10% 伏

**以常規50% 占空比為基礎。

†當使用60赫茲的功率時，輸出流量可提高達15%。採用乾燥器型號輸出流量可降低達15%。請相應地調整壓縮機的大小。





airtechniques.com

AIR STAR[®] ECO



CORPORATE HEADQUARTERS
1295 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3062
800-247-8324



AirStar and ECO are registered trademarks of Air Techniques, Inc.
© Copyright 2020
PN 9922-590 Rev. A

AIR
TECHNIQUES equipped for life[®]