



VACSTAR | VACSTAR NEO

VACSTAR® 和 VACSTAR® NEO

更多的性能。
更低的水耗。
更低的能耗。

AIR
TECHNIQUES equipped for life®





武装您的诊所

VacStar 液环真空系统自 1986 年投放市场以来一直受牙科医生的信赖，仍提供出类拔萃的性能。VacStar 和 VacStar NEO 系统在保持节省空间、紧凑型设计的同时，使牙科诊所能够始终如一地获得最高的吸力。以节水和节能为设计初衷，我们的液环真空系统经专门设计可降低您的公用事业帐单，并为您的经营促进注重环保的操作环境。VacStar 系列可通过定制适用于一到七个用户的任何诊所，并且可全面扩展至规模甚至更大的诊所。

随流量而变

VacStar 和 VacStar NEO 以与同类产品相比 显然更高的空气流量和更少的水更高效地武装牙科诊所。

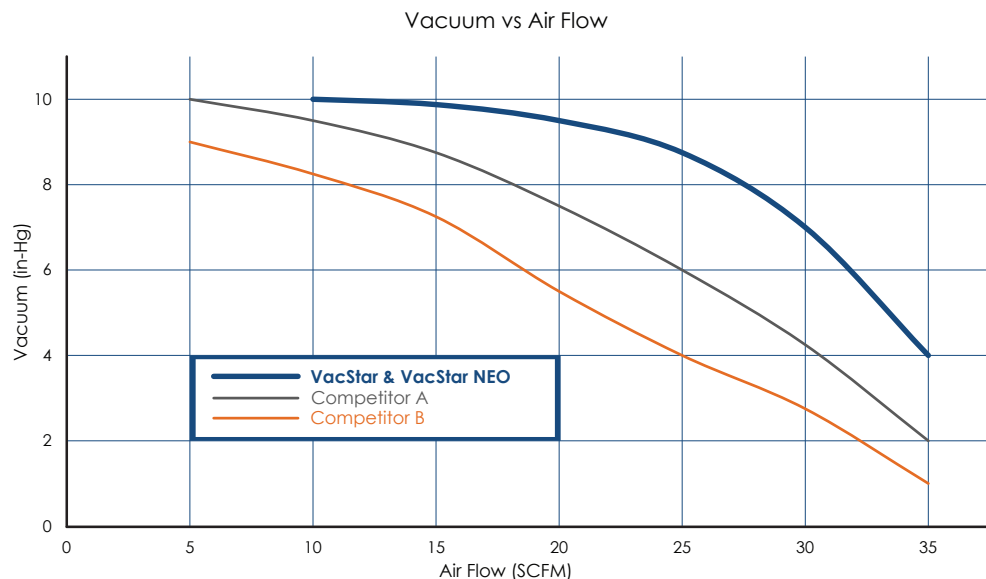


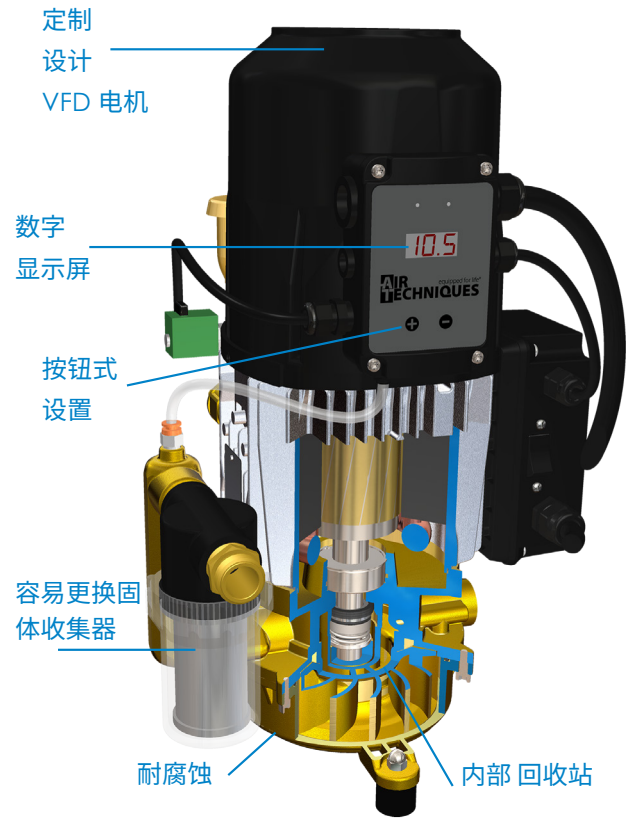


VacStar NEO


降低您的公用事业账单

VacStar NEO 液环真空系统搭载变频驱动 (VFD) 泵, 采用最先进的节水和节能技术, 可提供高的性能和寂静的操作。内部轴流式叶轮要求比以往更少的水, 同时可根据 VFD 系统的需求提供连续一致的真空度, 该系统仅在需要时才上升到满功率。这些节能功能将大大地减低您的水费和电费, 同时支持您成为环保型企业的业主。

- 无油电机和 VFD 泵可提供高的性能和寂静的操作。
- VFD 泵使用比常规泵平均低 70% 的电能。
- 每年平均节省 7,000 千瓦小时的电能。*
- 轴流式叶轮设计使用比常规液环少 85% 的水。
- 每年节省高达 150,000 加仑的水。*
- 数字真空稳压器可消除对机械泄压阀的需要。
- 按钮式真空度设置。
- LCD 显示错误代码, 便于故障检修诊断。
- 易于更换固体收集器。
- 所有节水功能俱全, 无需通风口。
- 用于清除亚硝酸盐的空气分离器单独出售。
- 每年降低您的公用事业账单 1,000 美元。*
- 减少您的企业碳排放。

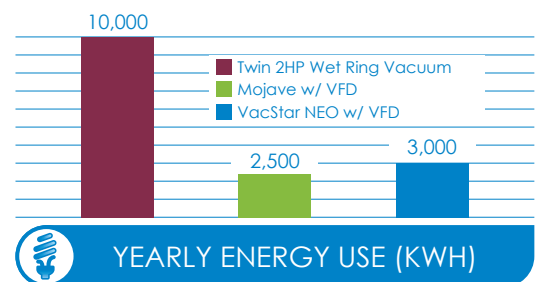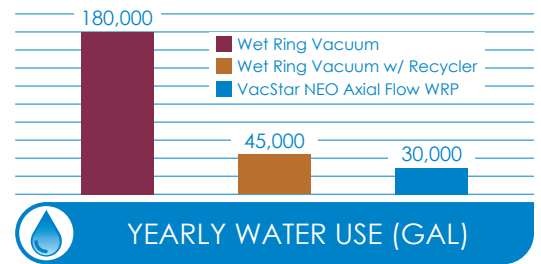

*基于双 2 马力泵系统相比 VacStar 80 NEO; 每年 2,000 小时; 0.12 美元/千瓦时

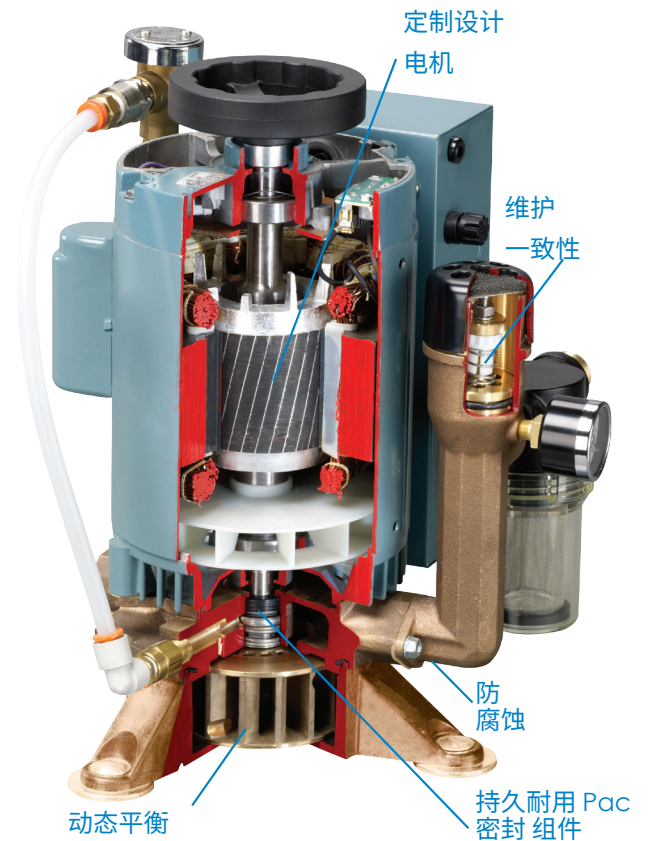

VacStar 保持您的诊所连续泵送

VacStar 液环泵四十多年来一直是值得信赖的最稳健和最紧凑的牙科真空系统。VacStar 搭载 Hydromiser 水循环再利用功能, 以更低的水耗支持牙科诊所的运营。在水循环再利用方面设定新的标准, HydroMiser 可回收传统液环牙科抽真空系统用水量的高达 75%。VacStar 始终以更低的水耗提供高的性能, 为您的牙科真空需求提供经济划算的解决方案。

- 无油电机和泵壳确保无处置麻烦或泄漏。
- 易于更换固体收集器意味着低维护费用和把更多的时间花在您的患者身上。
- 双泵机型独立运行, 可保障备份冗余。
- 与 Hydromiser 配套使用时, 每年可节省超过 65,000 加仑的水。
- Hydromiser 的操作不需要电或运动部件。
- 使用组合空气/水分离器回收水和去除亚硝酸盐。
- 真空均衡器附件通过监测真空需求自动打开或关闭泵。
- 所有机型均符合最新的 UL-60601-1 和 CAN/CSA C22.2 第 601.1 号标准。

规格



部件编号	最大用户个数	电压 (+/- 10%)	尺寸宽x高x深(英寸)	水流速(克/分)	断路器(安)
VS20 NEO	2	220	18.5 x 12 x 12	0.13	20
VS40 NEO	3	220	18.5 x 12 x 12	0.13	20
VS50 NEO	4	220	21 x 28 x 20	0.26	30 或 15 (x2)
VS80 NEO	7	220	21 x 28 x 17	0.26	40 或 20 (x2)



部件编号	最大用户个数	电压 (+/- 10%)	尺寸宽x高x深(英寸)	水流速(克/分)	断路器(安)
VS20	2	120, 220	14 x 11 x 11	0.50	20
VS40	3	220	17 x 11 x 11	0.75	20
VS50	4	220	22 x 28 x 16	1.00	30 或 15 (x2)
VS50H	4	220	25 x 28 x 16	0.26	30 或 20 (x2)
VS80	7	220	22 x 28 x 16	1.50	40 或 20 (x2)
VS80H	7	220	25 x 28 x 16	0.38	40 或 20 (x2)



所有 VacStar 机型均享受 5 年有限质保*

*VacStar 泵和电机享受 5 年质保

airtechniques.com

从设计到安装

所有 VacStar 液环真空系统均是在我们的 200,000 平方英尺纽约工厂生产的, 具备为您提供高质量真空的专长和关怀, 完全有益于加强您的诊所。如同以往, 您可依赖 Air Techniques 提供最佳的客户服务和技术支持。从设计到安装, Air Techniques 将伴您走完整个过程的每一步。



公司总部
1295 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3062
800-247-8324



VacStar 和 VacStar NEO 是
Air Techniques, Inc. 的
注册商标。
版权所有 © 2018 年
PN 9922-489-ZH 修订版 A

AIR
TECHNIQUES equipped for life®